Lombard MEDICAL




altura™
Endograft System

Design Revolucionário
Vantagens Extraordinárias

Sem Canulação • Entrega em 14F • Quadrafix-Seal • Reposicionável

Sistema de Entrega Simplificado
Posicionamento Preciso

O Sistema de Endoprótese Altura™ representa uma abordagem revolucionária para a EVAR. Seu design inédito é composto de um um sistema de stent em D bilateral reposicionável único, que não exige canulação do membro contralateral e é entregue em um cateter de perfil ultra-baixo de 14F. Uma ampla gama de pacientes pode ser tratada com apenas seis códigos de produto, o que simplifica o planejamento do caso e a gestão do inventário.

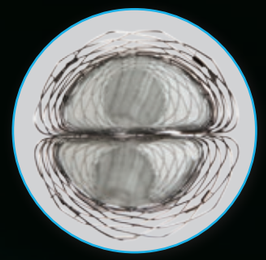



Design de Stent em D Bilateral Exclusivo


- Elimina a canulação do membro contralateral, simplificando os procedimentos
- Stent de nitinol entrelaçado fornece flexibilidade excepcional e conformidade com o vaso
- Enxerto em tecido de poliéster de porosidade ultra-baixa com endoesqueleto que amplifica as propriedades de vedação
- Marcadores radiopacos para posicionamento preciso e fácil alinhamento do septo
- Dois pares de âncoras supra-renais em cada stent aórtico evitam a migração



Sistema de Entrega de 14F de Perfil Ultra-Baixo

- Projetado para melhorar o acesso e minimizar o trauma do vaso
- Nenhuma nova colocação necessária para remoção atraumática
- Sistema de Entrega da endoprótese otimizado garante o poscionamento controlador e preciso
- Portas de injeção de contraste acopladas simplificam o procedimento



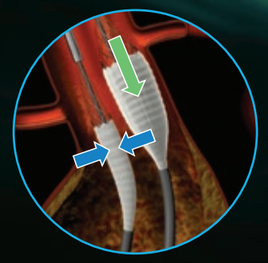


Reposicionável para um poscionamento Exato

- As endopróteses bilaterais podem ser reposicionadas para a colocação precisa
- Sistema de entrega da endoprótese aórtica em cinco etapas intuitivas confere um implante controlado.
- O implante nas artérias ilíacas é retrogrado em etapa única exclusiva, para exatidão do posicionamento na artéria ilíaca interna



Quadrafix-Seal

- Direcionado para cada vaso e fornece quatro pontos de exatidão
- Capacidade de posicionar e compensar independente as endopróteses aórticas maximizando a vedação no colo infrarenal.

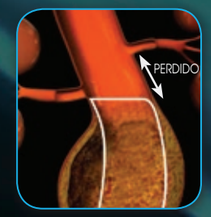

Tradicional



Altura

> O design exclusivo da Altura elimina a canulação evitando barreira, o que pode ser desafiador e demorado com um stent tradicional. Junto com a colocação ilíaca retrógrada, essas inovações tornam os procedimentos previsíveis, extremamente precisos e mais fáceis.
>
> – *Prof. Dainis Krievins*
> *Cirurgião Vascular, Diretor do Instituo de Ciências,*
> *Hospital da Universidade de Stradins, Riga, Letônia*

Planejamento de Caso Otimizado
Controle de Inventário Simplificado



O portfólio do Endoprótese Altura é composto de seis códigos de produto. O que permite o tratamento de uma ampla gama de pacientes, junto com planejamento de caso e gestão de inventário simplificados.

Endoprótese Aórtica			
Código de Produto	**Diâmetro do Endoprótese (mm)**	**Intervalo de tratamento**	**Diâmetro do Stent Supra-renal (mm)**
01-AA-24-090	24	18-22	29
01-AA-27-090	27	21-25	33
01-AA-30-090	30	24-28	36

Endoprótese Ilíaca.		
Código de Produto	**Diâmetro Distal (mm)**	**Faixa de Tratamento* (mm)**
01-AI-13-065	13	8-11
01-AI-17-065	17	11-15
01-AI-21-065	21	15-18

* Diâmetro de tratamento medido a partir do lúmen do vaso

Sede Corporativa
Lombard Medical, Inc.
6440 Oak Canyon, Suite 200
Irvine, CA 92618 | Tel.: 866 790 1447
E-mail: USinfo@lombardmedical.com
LombardMedical.com

Reino Unido
Lombard Medical, Inc.
Lombard Medical House
4 Trident Park Didcot
OX11 7HJ | Tel.: +44 (0) 1235 750800
E-mail: globalinfo@lombardmedical.com

Consulte as instruções de uso do produto para todas as indicações, contraindicações, advertências e precauções. Altura Endograft System possui a Marca CE e não deve ser distribuído nos EUA.

© 2016 Lombard Medical Technologies, Inc. O logo da Lombard Medical, o logo do Sistema de Endoenxerto Altura e o nome Altura são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Lombard Medical Technologies, Inc. PN03916

Lombard MEDICAL